

SINCE 1889



**2020年9月末で
イオン交換樹脂ICRの再生及び、
販売業務は終了いたします。**

2020年9月末で、イオン交換樹脂ICRの再生及び販売は終了し、それ
にともないキャンペーン対象機種の使用ができなくなります。お客様
には、このキャンペーンをご活用いただきお早目の買替えをお奨めい
たします。

イオン交換樹脂 ICR を使用した純水製造装置を
ご使用のお客様限定！

純水製造装置 買替えキャンペーン

2019年4月～2020年9月末のご発注分まで

本体価格

40～45% off

キャンペーン対象機種

WG23/25 WA33(N) WA53/73 WE21 WL21/21P



WG23



WG25



WA33(N)



WA53/73



WE21



WL21



WL21P

推奨機種一覧

カートリッジの交換作業が簡単に



ヤマト科学株式会社

130th
Anniversary

蒸留水仕様

純水製造装置オートスチル® スタンダードタイプ


キャンペーン対象機種

型 式	製造量	採取方式
WG23	約1.8L /h	イオン交換⇒蒸留
WG25	約1.8L /h	イオン交換⇒蒸留
WA33N	約1.8L /h	蒸留⇒イオン交換⇒ろ過

推奨機種

型 式	製造量	採取方式	キャンペーン価格
WG204	約1.5L /h	イオン交換⇒蒸留	430,000⇒237,000円
WG251	約1.5L /h	イオン交換⇒蒸留⇒ろ過	498,000⇒274,000円

※採取方式の蒸留⇒イオン交換⇒ろ過と同じ方式はございません。

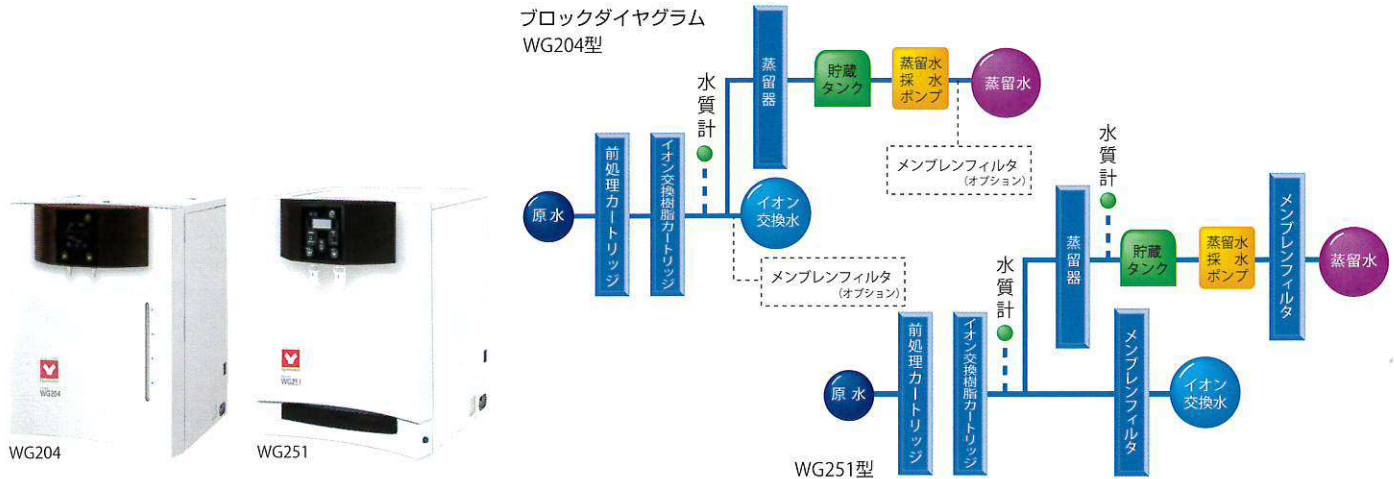

商品コード	253154	253152
型 式	WG204	WG251
採水方式	イオン交換⇒蒸留	イオン交換⇒蒸留⇒ろ過
給水方式	ワンタッチカブラ水道接続/止水弁付	ワンタッチカブラ水道接続樹脂ホース/フリーホース接続
排水方式	左右選択接続方式/ホース接続	
採取純水	イオン交換水・蒸留水	
蒸留水製造量	約1.5L/h	
蒸留水採取量	約1L/min	0.5～1L/min
イオン交換水採取量	約1L/min	0.5～1L/min
採取容量設定範囲	連続採水	0.1～30L/連続採水
凝縮器	硬質ガラス	
ヒータ	セラミックヒータ 1.2kW	
前処理カートリッジ	0.1μm中空系+活性炭入り	
イオン交換樹脂カートリッジ	CPC-S 4Lタイプ 1本(活性炭入り高純度カートリッジ)	
蒸留水・イオン水最終ろ過	オプション	0.1μm×2(メンブレンフィルタ)
漏水検知	漏水時漏水検知センサにより給水電磁弁強制遮断	漏水時漏水検知センサにより給水電磁弁強制遮断
蒸留水貯蔵タンク	20Lポリエチレンタンク	30Lポリエチレンタンク
蒸留水UV殺菌	無し	オプション
採水流し台	無し	引き出しタイプ・耐荷重10kg 5L手付きビーカー対象
多目的蒸留水採取口	本体右側面 1個	WR型への給水接続 本体右側面
水位検知	リードスイッチ2段階検知	リードスイッチ5段階検知
原水圧力範囲	0.5～5×100kPa (0.5～5kgf/cm ²)	0.5～5×100kPa (0.5～5kgf/cm ²)
水位表示	連通管水位表示	LED表示
水質表示	導電率5段階LED表示	デジタル(導電率・比抵抗切り換え)
その他の表示	消耗品交換表示(イオン交換樹脂カートリッジ)	
付属品	給水/排水ホース約2m、接続ホースアセンブリ、缶石洗浄剤、前処理カートリッジ、イオン交換樹脂カートリッジ、ホースクランプ	給水/排水ホース約2m、接続ホースアセンブリ、缶石洗浄剤、前処理カートリッジ、イオン交換樹脂カートリッジ、メンブレンフィルタ、ホースクランプ、シールテープ
外寸法(幅×奥行×高さ)/重さ	600×575×780mm/48kg	600×660×780mm/55kg
電源容量/定格電源(ブレーカ)	AC100V/12.5A (20A)	
消耗品	前処理カートリッジ 中空系+活性炭 PW-1 253099 25,300円 イオン交換カートリッジ CPC-S 253080 24,200円 タンクエアバントフィルタ AVF-1 2,000円	前処理カートリッジ 中空系+活性炭 PWF-1 253099 25,300円 イオン交換カートリッジ CPC-S 253080 24,200円 メンブレンフィルタ 2個入り MFRL727 9020010004 12,400円 タンクエアバントフィルタ AVF-1 9020020001 2,000円
オプション	架台 AS250 (外形寸法:幅603×奥行683×高さ870mm) 253174 60,000円 採水ホースユニット OWG24 ホース長さ2m 253204 12,000円 給水口ユニット OWH10 253686 24,000円 原水用減圧弁 OWG42 253769 13,000円 殺菌灯(WG251用) OWG20 253202 80,000円 接続ユニットG(WL100+WGシリーズ) 253668 20,000円 排水トラップ OWI110 (WG204用) 253221/ (WG251用) 253221 160,000円 メンブレンフィルタ(WG204用)2個入り MFRL727 9020020001 12,400円 UVランプ(WG251用) OWG28 253773 31,000円	

蒸留水(大容量)仕様

純水製造装置オートスチル® 大容量タイプ

キャンペーン対象機種


型 式	製造量	採取方式
WA53	約5L /h	蒸留⇒イオン交換⇒ろ過
WA73	約10L /h	蒸留⇒イオン交換⇒ろ過

推奨機種

型 式	製造量	採取方式	キャンペーン価格
WA511	約5L /h	前処理⇒蒸留⇒イオン交換⇒ろ過	990,000 ▶ 588,000円
WA711	約10L /h	前処理⇒蒸留⇒イオン交換⇒ろ過	1,280,000 ▶ 768,000円
WA731	約10L /h	前処理⇒蒸留⇒イオン交換⇒ろ過	1,280,000 ▶ 768,000円



ブロックダイアグラム
WA511/711型

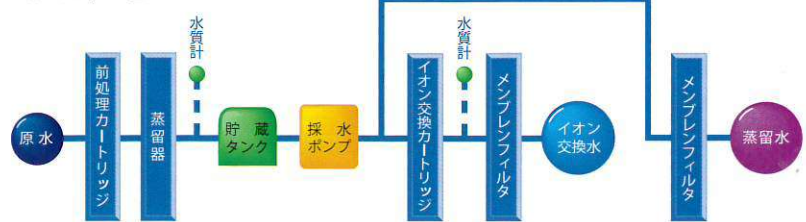

商品コード	253114	253115	253116
型 式	WA511	WA711	WA731
方式・性能	水質レベル 蒸留水 JIS K0557 A1規格準拠 水質レベル イオン交換水 JIS K0557 A4規格準拠 採水方式 蒸留水 前処理⇒蒸留⇒ろ過 採水方式 イオン交換水 前処理⇒蒸留⇒イオン交換⇒ろ過 蒸留水製造量 約5L/h 約10L/h 採水量 蒸留水 約1.4L/min 採水量 イオン交換水 約1.4L/min 採水容量設定範囲 0.1~85L/連続採水 排水 左右、背面選択接続方式/ホース接続 凝縮器 ステンレス鋼 ヒータ パイプヒータ 1.9kW 2本 パイプヒータ 2.55kW 3本		
構成	前処理カートリッジ 0.1μm中空糸膜+活性炭入り(PWF-1) (通水量 約5000Lで交換) 最終ろ過 0.1μmメンブレンフィルタMFRL730 (採水口取付) (通水量 約3000Lで交換) イオン交換樹脂カートリッジ ワンタッチ接続式カートリッジ (CPC-H 3L) 蒸留水貯蔵タンク ポリエチレン製 100Lタンク 85L、55L、30Lの3段切替 採水流し台 ステンレス製大型流し台 (水はね防止機構付) 規格 原水圧範囲 0.15MPa~0.50MPa 安全装置 漏電ブレーカ、漏水検知センサ、減圧弁、水質異常警報 付属品 給水ホース (ストップ付口金付)、缶石洗浄剤 (1kg)、高純度カートリッジ (CPC-H)、前処理カートリッジ、メンブレンフィルタ (2個)、シールテープ、ホースバンド、排水ホース Assy 3m		
消耗品	前処理カートリッジ 中空糸+活性炭 PWF-1 253099 25,300円 メンブレンフィルタ(1個) MFRL730 9020010006 13,200円		
オプション	給水口ユニット OWH10 253686 24,000円 接続ユニットG (WL100+WGシリーズ) 253668 20,000円 接続口ホース継手 (セット採水口より2m延長) OWF 253208 14,000円 高純度カートリッジ CPC-H CPCN30011 44,900円 排水トラップ OWI121 (WA511用) 253222/OWI141 (WA711用) 253223/OWI151 (WA731用) 253224 160,000円 イオン交換樹脂カートリッジ(オプション) CPC-N CPCN30010 23,800円		

カートリッジ方式のメリット

■カートリッジの交換作業が簡単に



前処理カートリッジ、イオン交換樹脂カートリッジなど、カートリッジの交換がワンタッチで簡単に行えます。

イオン交換カートリッジのリサイクル



- ◆使用済みイオン交換カートリッジは、宅配便の着払い伝票によりお客様から回収しリサイクルを行います。
- ◆イオン交換カートリッジをリサイクルすることにより、CO₂排出量を減らし環境負荷の低減に努めています。

イオン交換水仕様 純水製造装置ピュアライン® シリーズ


キャンペーン対象機種

型 式	採水量	採水方式
WL21	約1.5L /min	イオン交換→ろ過
WL21P	約1.6L /min	イオン交換→ろ過
WE21	約0.5~1.2L /min	逆浸透→イオン交換

推奨機種

型 式	採水量	採水方式	キャンペーン価格
WL200	約1L /min	イオン交換→ろ過	225,000円→124,000円
WL220	約1L /min	イオン交換→イオン交換→ろ過	258,000円→142,000円
WE200	約0.5~1L /min	RO膜→イオン交換→ろ過	398,000円→239,000円

※上記機種には純水タンクはありません。

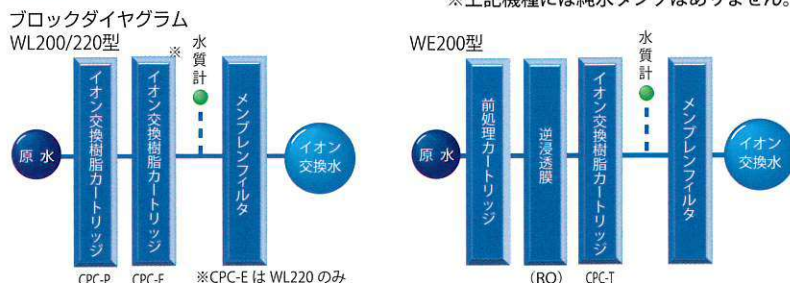

商品コード	253627	253628	253682
型 式	WL200	WL220	WE200
方式・性能	イオン交換(採水キー) ワンタッチカプラ水道接続樹脂ホース 約1L/min 連続採水		RO膜→イオン交換→ろ過 ワンタッチカプラ水道接続 樹脂ホース 0.5~1.0L/min連続採水
構成	ろ過 イオン交換樹脂カートリッジ 活性炭入り2Lイオン交換樹脂 (CPC-P) 1本 最終ろ過 0.1μm (メンブレンフィルタ) 原水圧力範囲 0.5~5×100kPa (0.5~5kgf/cm ²)		前処理カートリッジ(活性炭+中空糸膜0.1μm) 逆浸透膜 RO 活性炭入り2Lイオン交換樹脂 CPC-T 0.1μm (メンブレンフィルタ) 0.13~0.5MPa (1.3~5kgf/cm ²)
規格	原水水温範囲 10~30℃ 採水口 床より250mm位置 Rc 1/4 (メンブレンフィルタ接続) 排水口 ー 排水量 ー 安全装置 サーキットブレーカ、漏水検知器、減圧弁、水質異常警報		10~30℃ 床より250mm位置 Rc 1/4 (メンブレンフィルタ接続) φ10硬質チューブ差込 最大2.2L/min 断水異常、水質センサ異常、コントローラ異常、圧力上/下限異常、 湯水異常、流量低下警告、流量低下異常、漏電ブレーカ
表示	水質表示 7セグLED表示(導電率/比抵抗) その他の表示 消耗品交換表示(CPC-P、CPC-E:水質劣化時に同時交換、メンブレンフィルタ)、警告表示(水漏れ警報)		7セグLED表示(導電率/比抵抗/水温切替) 各種警告/異常表示、消耗品交換時期通知
付属品	原水給水ホース、電源コード(2m)、イオン交換樹脂CPC-P+CPC-E、 メンブレンフィルタ、シールテープ イオン交換樹脂CPC-P(WL200用)		原水給水ホース、前処理カートリッジ、RO膜 (カートリッジ式)、イオン交換樹脂カートリッジ CPC-T、メンブレンフィルタ、排水ホース(φ 10×3m)、電源コード、シールテープ
外寸法(幅×奥行×高さ)／重さ	350×350×450mm／14kg		350×430×470mm／30kg
電源容量／定格電源(ブレーカ)	AC100~240V／0.05~0.2A (3A)		単相AC100~240V／1.3A (10A)
消耗品	イオン交換樹脂カートリッジ CPC-P 253254 18,000円 イオン交換樹脂カートリッジ CPC-P+CPC-E 253262 33,000円 メンブレンフィルタ(2個入り) MFRL727 9020010004 12,400円		前処理カートリッジ PWF-1 253009 25,300円 逆浸透(RO)膜カートリッジセット 253257 38,000円 イオン交換樹脂カートリッジCPC-T 253256 18,000円 メンブレンフィルタ(2個入り) MFRL727 9020010004 12,400円
オプション	給水口ユニット OWH10 253686 24,000円 原水用減圧弁 OWH10 253769 13,000円 CPC-E接続セット (CPC-E含む/WL200専用) OWL36 253261 43,000円 前処理カートリッジ接続セット OWL38 253267 52,000円 採水スタンド(接続セット付き) OWL40 253266 46,000円 外部警報出力端子 OWL42 253268 17,600円 リモート採水機能 OWL44 253269 17,600円 リモート採水機能(採水スイッチ付き) OWL46 253270 38,000円 電源コード(4m) OWL52 253273 10,000円		給水口ユニット OWH10 253686 24,000円 採水スタンド(接続セット付) OWL40 253266 46,000円 外部警報出力端子 OWE10 253278 17,600円 リモート採水入力端子 OWE12 253279 17,600円 フットスイッチ OWE14 253280 38,000円



注意

本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。
ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、
当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。●価格には、消費税が含まれておりません。
●記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「®」は記載しておりません。

SINCE 1889



科学技術の進歩・発展のために

ヤマト科学株式会社

本社:〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-2-1 ※2019年7月以降は下記新住所
〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11 晴海トリトンスクエア オフィスタワーY36階

お客様総合サービスセンター

0120-405-525 携帯電話からは 0570-064-525

【受付時間】9:00~17:30 ※土・日・祝日・振替休日を除く(12:00~13:00の間も受け付けております)

＜E-mail＞ info@yamato-net.co.jp ＜URL＞ www.yamato-net.co.jp

●営業・サービス拠点

札幌 (011)707-0371 筑波 (029)852-3411 東京 (03)5639-7071 川崎 (044)540-3751 長野 (026)291-6001 北陸 (076)443-8603 広島 (082)221-0921
仙台 (022)216-5701 北関東 (048)642-2569 東京北 (03)5939-4761 横浜 (045)828-1631 静岡 (054)288-9025 京滋 (075)646-5671 福岡 (092)263-7550
前橋 (027)280-4650 千葉 (043)241-7085 東京西 (042)352-3211 厚木 (046)224-6911 名古屋 (052)202-3051 関西 (06)6101-3112

Copyright© Yamato Scientific Co., Ltd. All Rights Reserved.

●お求めは、信用とサービスの行き届いた当店へ

Cat.No:201903BT(1)P



本 社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 0798-66-2212
京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488
滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005
奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-542-6883

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

このカタログの記載内容は2019年3月現在のものです。